


Ascorbico e Isoascorbico


CGS 2224.07

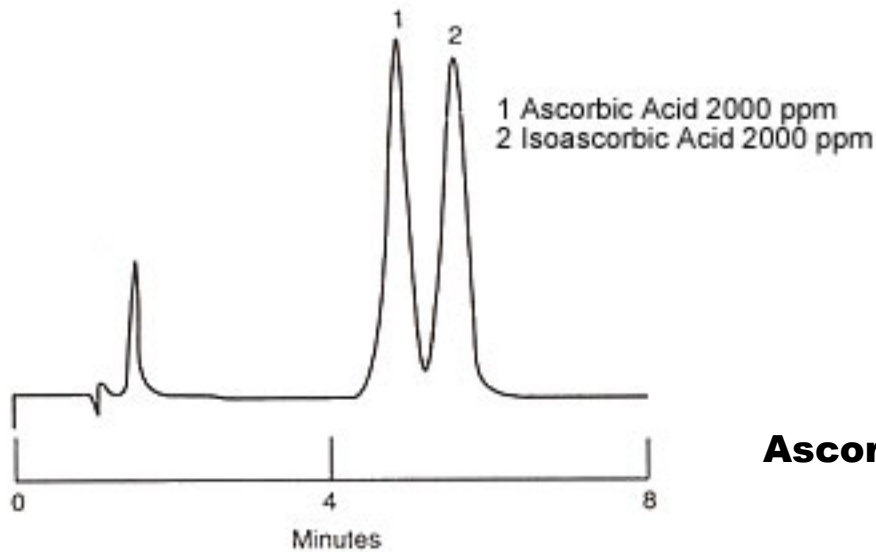

Fluxo: 2 mL/min
Injeção: 5 uL
Detecção: UV de 260 nm

Ascorbic and Isoascorbic Acids in Coleslaw

CGS 2225.07

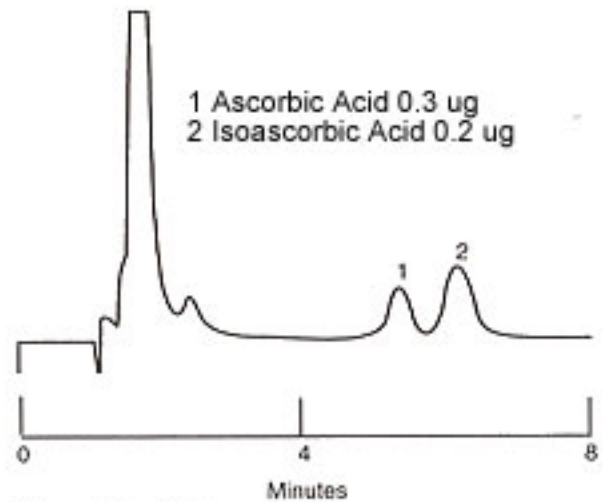

Fluxo: 2 mL/min
Injeção: 50 uL
Detecção: UV de 260 nm
Preparação Teste: Homogenizado 1:4 (w/v)
Água
313 Filtro Papel. Ajusta pH 3.0, 1 Ácido
Hidroclórico.
Acetonitrila 50%, Filtra 0.2 Nylon. Injeta.